



ПИКАССО

## Инструкция. Как открыть КТ исследование на компьютере под управлением Mac OS?

**Ниже приведена инструкция  
по открытию исследования на компьютерах Apple.**

### **Обратите внимание:**

- Исследования, сделанные в программе Ez3D (Vatech), невозможно открыть на компьютерах Apple.
- Исследование обязательно должно быть записано однокадрово (1 большой файл с расширением dcm).
- Уточняйте это при заполнении направления в комментариях, поскольку обычно исследование записывается многокадрово (много файлов с расширением dcm).

Если этой инструкции недостаточно для решения Ваших задач,  
свяжитесь с нами по почте [help.picasso@gmail.com](mailto:help.picasso@gmail.com)

*Диагностика как искусство!*

[www.picasso-diagnostic.ru](http://www.picasso-diagnostic.ru)

## шаг 1


- Зайдите в **AppStore**;
- Напишите в строке «Поиск» – **Planmeca**;
- Установите программу

## шаг 2

- Запустите программу Planmeca


## шаг 3

После запуска  
нажмите на кнопку **«Открыть DICOM»**

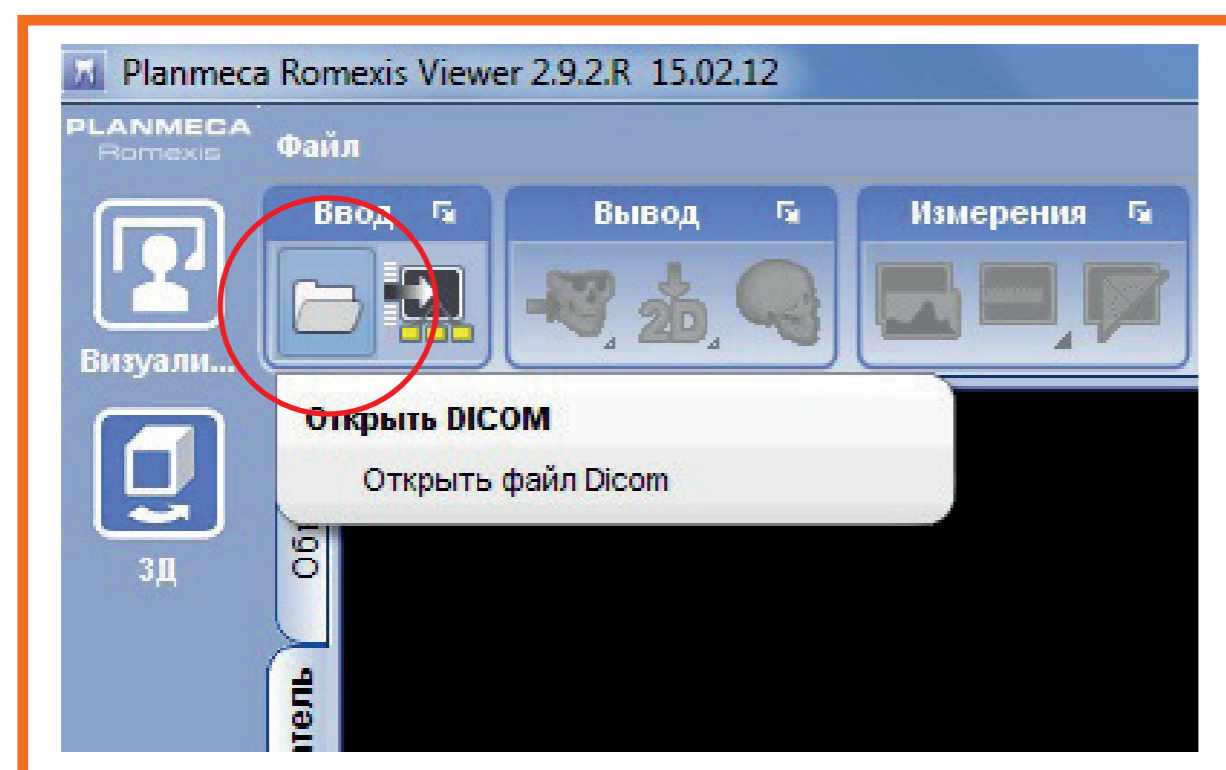


## шаг 4

В открывшемся окне  
нажимаем кнопку **«Обзор»**

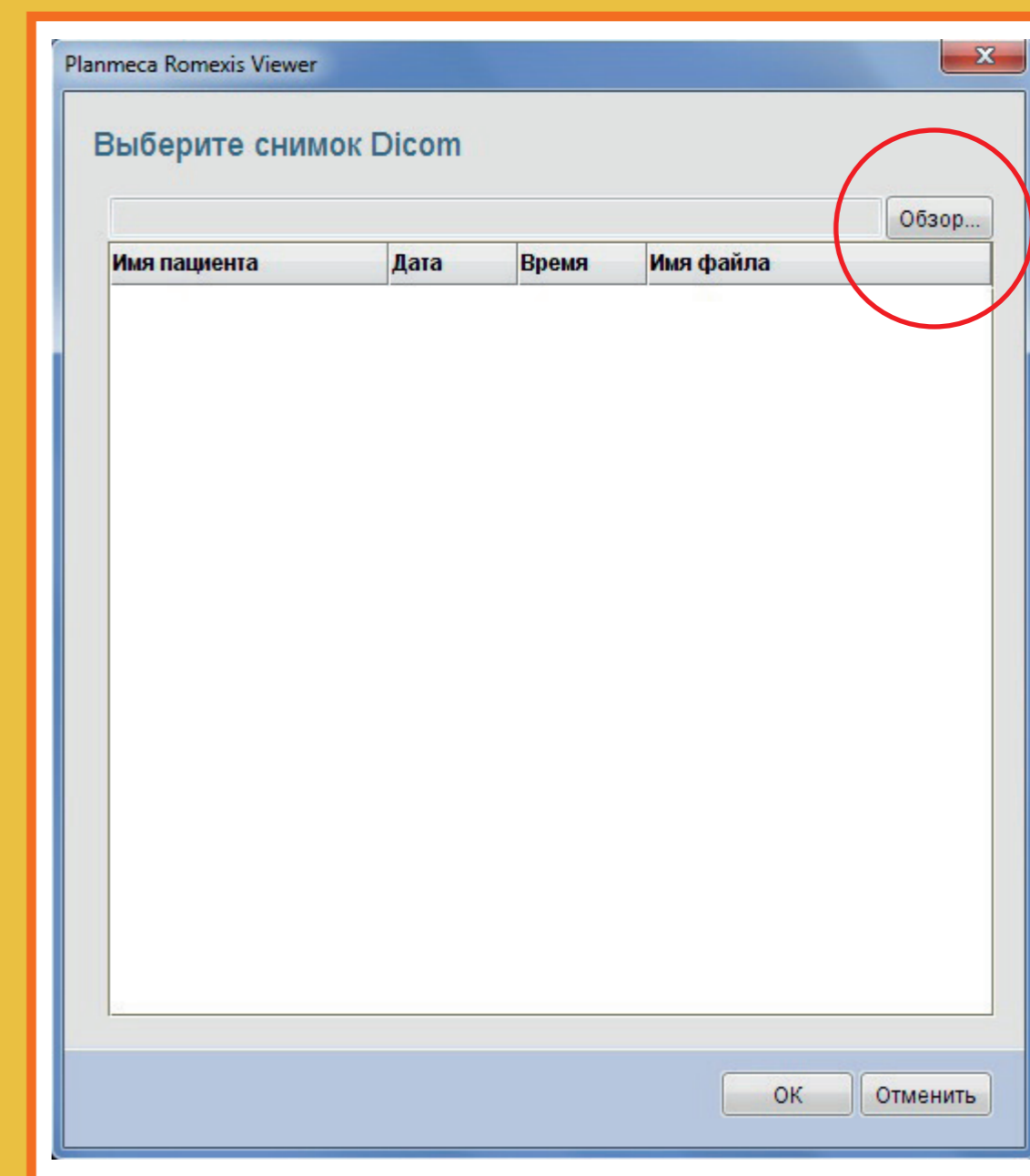

## шаг 5

В новом открывшемся окне найдите Ваше исследование

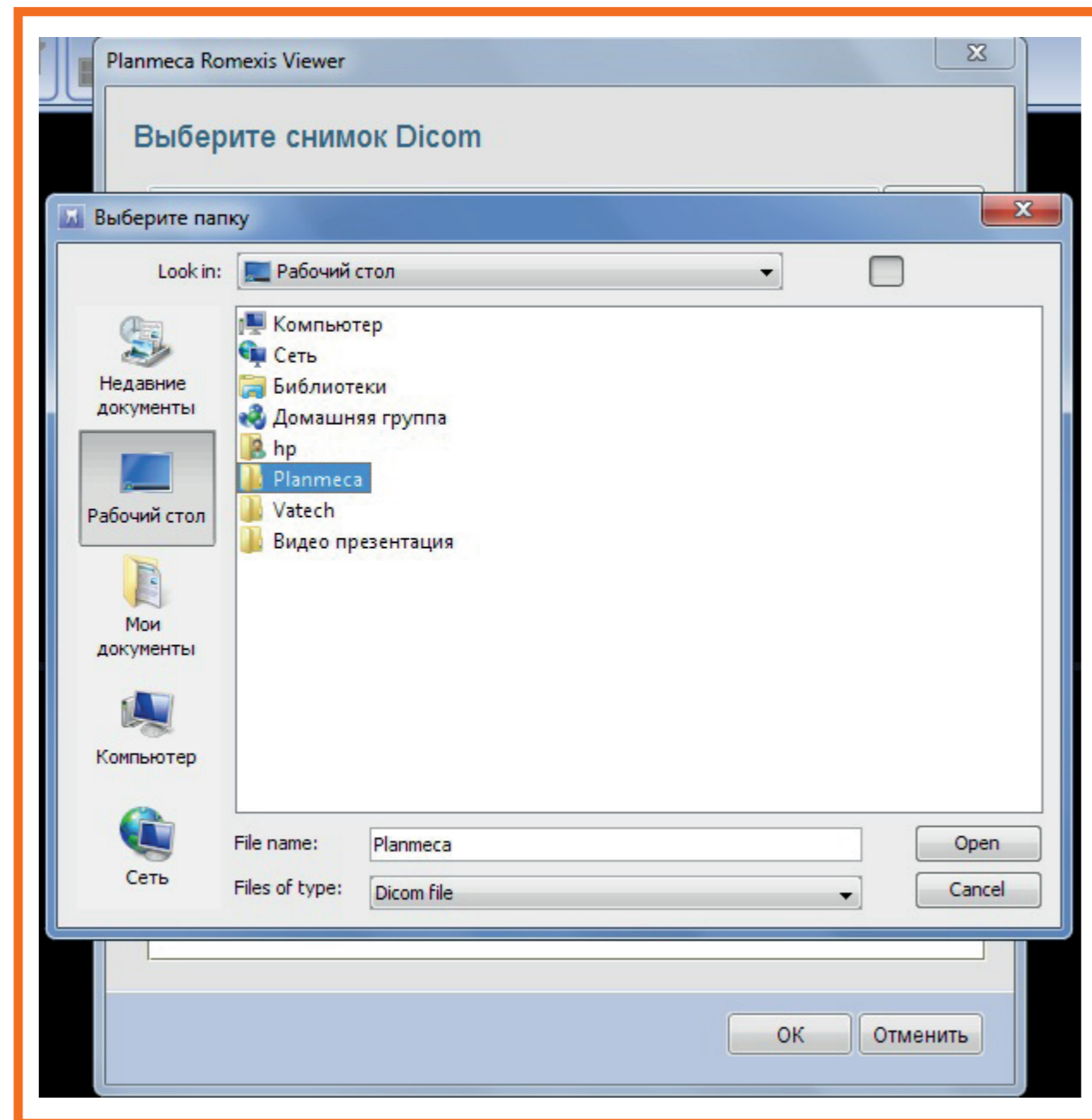


## шаг 6

- Зайдите в папку с Вашим исследованием;
- Откройте папку «**Images**»

# шаг 7

- В папке «**Images**» выберите Ваш файл, например «**Rx3D.dcm**»;
- Нажимаем кнопку «**Open**»

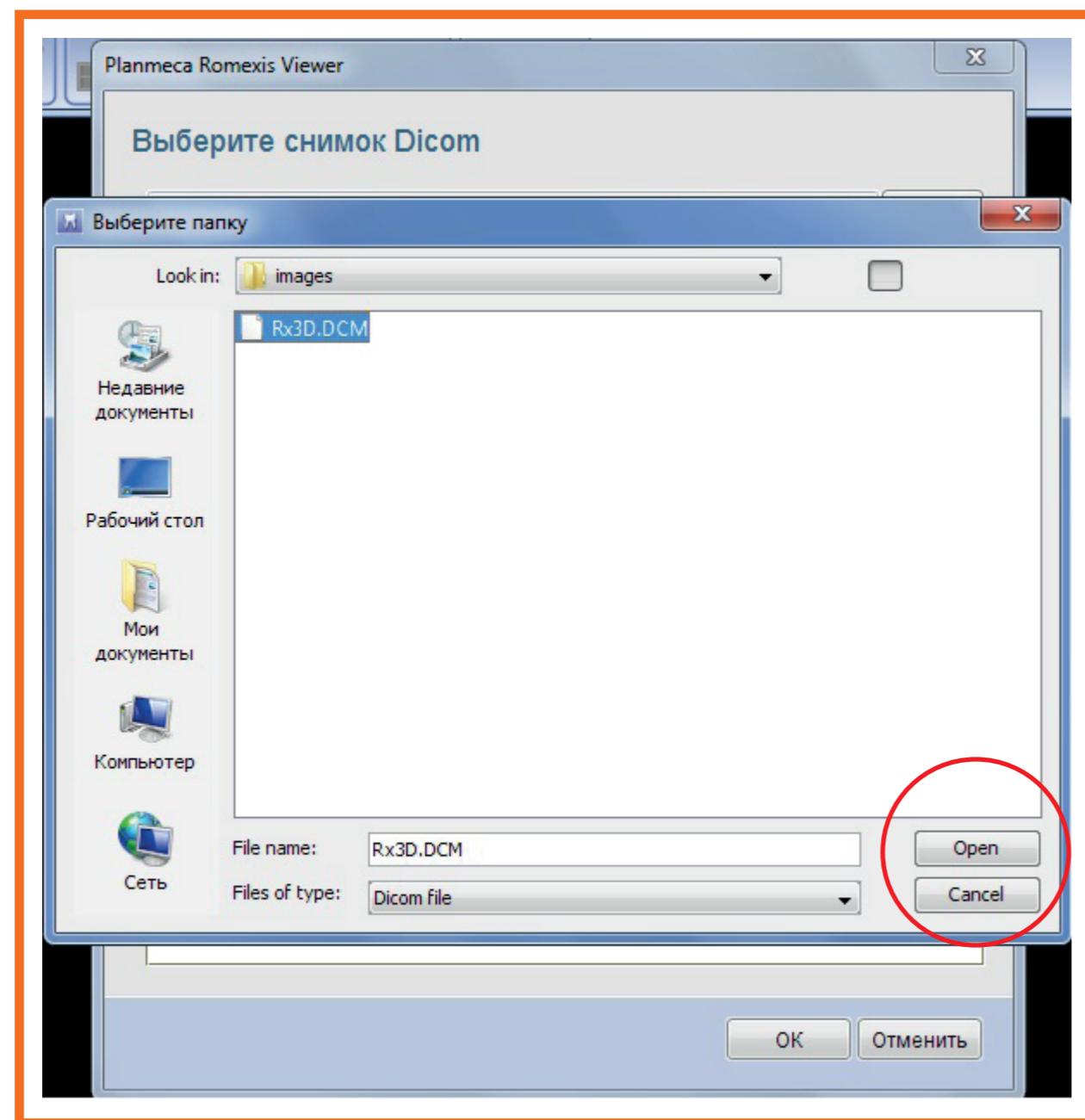

# шаг 8

- Ваше исследование загружается;
- Два раза нажмите на открытый файл

Объемы	Дата снимка	Размер снимка	Размер воксела ...	Серийный номер	kV	mA	s	DAP(mGy*cm <sup>2</sup> )	Комментарии	Просмотр
Обзорщик	10.09.12 15:19	400 × 400 × 230	400	TDV320660	90	14	13.777	1627.8		